



Práctica de Laboratorio: Explicación del Dashboard

Docente: [Ana Maria Cuadros](#)Valdivia

Alumno: Jorge Tito Ccahuaya


01.- Inicialmente tenemos 4 tabs, en el primero se representará toda la información general que nos proporciona el header principal de cada archivo .edf de todas las particiones, por el momento mostramos la cantidad total entre todas las particiones de archivos .edf y la cantidad de pacientes que se incluye en el dataset TUSZ



02.- Para cada partición [train/dev/eval] tenemos un header el cual nos muestra cuantos archivos edf y pacientes existen además mediante un gráfica de barras mostramos la frecuencia de configuraciones que se hacen entre todas las sesiones, cabe recalcar que las configuraciones existentes son 01_tcp_ar que significa que la lectura de cada muestra son hechas con la resta de la lectura actual y el promedio de todas las demás. Luego tenemos la configuración 02_tcp_le que significa que la lectura de cada muestra son hechas con la resta de la lectura actual y el promedio de los canales A1 y A2, y la configuración 03_tcp_ar_a es un versión mejorada de la primera, cabe recalcar que solo se define los montajes para la configuración 01_tcp_ar.




03.- Dado que el dataset para cada partición parte de una lista de paciente anonimizados estructurado en carpetas es útil para nosotros listar a dichos paciente y a partir de ellos mostrar sus sesiones correspondientes, eso lo ubicamos en la parte izquierda de nuestro dashboard, cabe recalcar que al darle click sobre cada paciente entonces le mostraremos la estructura de esta.

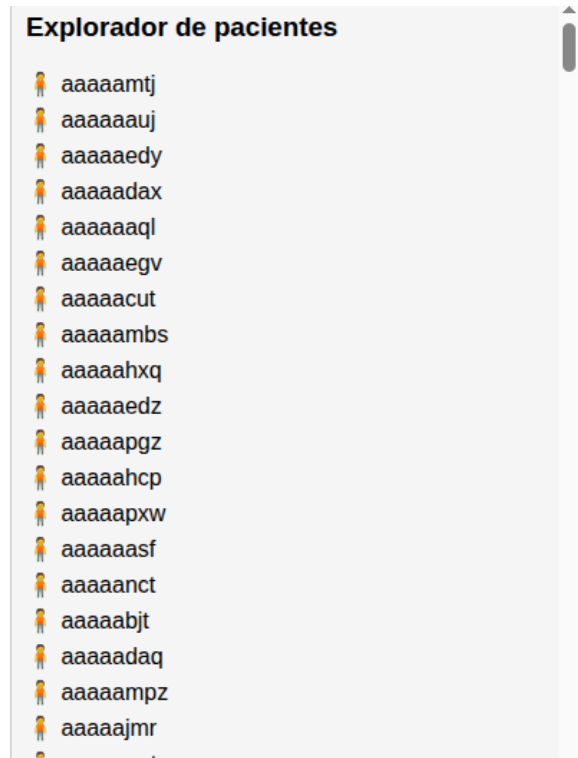


04.- Entonces al darle click sobre cada paciente podremos ver que esta se divide en sesiones que fueron tomadas en diferentes fechas, ahora dentro de cada sesión puede haber una o más configuraciones (las que ya hablamos anteriormente), para cada configuración le corresponde 3 archivos con las extensiones .csv, .csv_bi y .edf.



05.- Luego al hacer click en cada archivo edf que se mostró ya de alguna configuración podemos ver un intervalo de tiempo que es el tiempo total de dicha señal, si en caso para esa señal haya alguna anotación si hubo algun evento epileptico entonces aparecera una linea vertical indicando en qué intervalo de tiempo sucedió este, Por el contrario como la imagen si no hay un se muestra todos los montajes de inicio a fin.

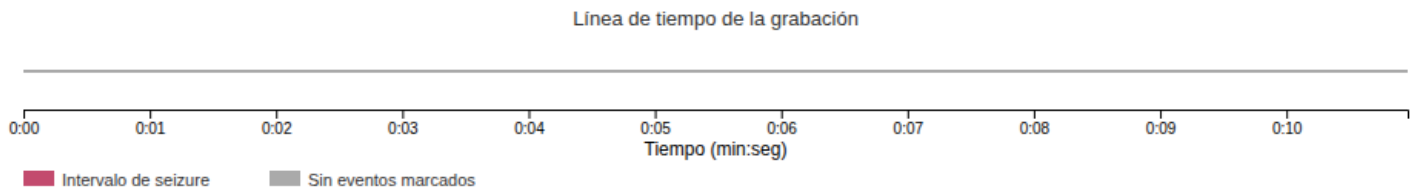

06.- Este sera el gráfico que se muestre en el caso no hay ninguna anotación, en el eje de las abscisas tenemos al tiempo y en el eje de las ordenadas tenemos a los montajes entre los canales.

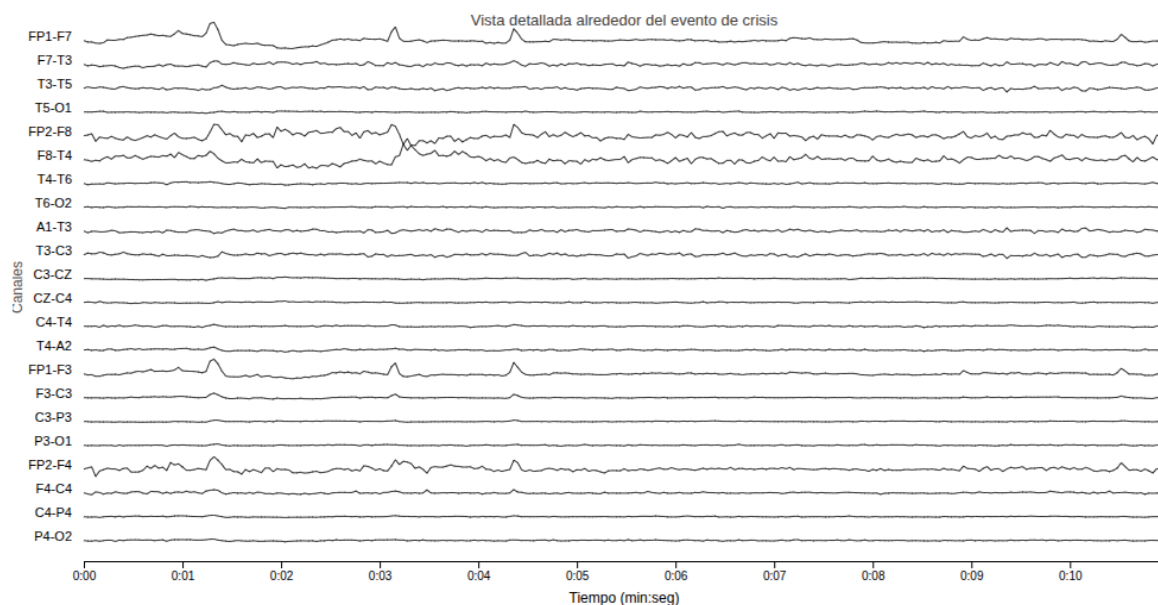

07.- Luego , en el caso de que si haya una anotación para dicha señal entonces, se mostrará un intervalo de color lila que indica que en ese intervalo si hubo un evento epileptico. Cabe destacar que al hacer clic sobre este intervalo nos mostrará un gráfico precisamente que representa este intervalo.

